



027-87326962



BD@binhui-bio.com



湖北省鄂州市葛店开发区
光谷联合科技城D3-4




湖北省武汉市东湖新技术开发区
高新大道666号

WWW.BINHUI-BIO.COM.CN

包封仪器 ENCAPSULATION INSTRUMENT

- 设备采用不锈钢柱塞泵作为物料抽取模块，具有高压、高流量精度、高稳定性等特点；
- 设备可根据要求设定进料压力、流量以及两相液体的送料比例，精确控制进料量；
- 设备进料和出料管道采用进口快插接头连接，可使用一次性装置（瓶装、袋装）的同时，也可卸下进行消毒；
- 配备工业专业控制设备，全过程电脑软件自动控制，操作简单，整机性能稳定，可长期运行；
- 设备混合芯片及管道处设置紫外灯消杀装置，在闭门情况下定期进行紫外消杀；
- 设备外形采用304不锈钢进行制作，与材料接触部位均采用316不锈钢制作，满足设备在A级环境（生物安全柜）的使用要求；
- 设备所有管道均满足0.5mol/L NaOH溶液消杀和蒸汽消杀时的性能要求；
- 设备配备网口对接功能，满足多台设备同时使用和远程操控功能；
- 设备使用时无耗材、免维护、使用成本低廉，省时省能；
- 设备满足GMP生产要求；
- 标记环保不褪色，符合ROHS标准。

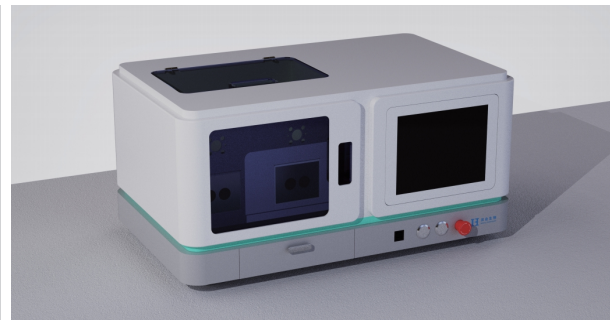

✓ 设备自研，拥有自主知识产权

✓ 连续包封，最大处理量可达 15L/H

✓ 粒径稳定，Z-average 在 85+15nm

✓ 分布系数 PDI 在 0.3 以内

✓ 包封率在 90% 以上

